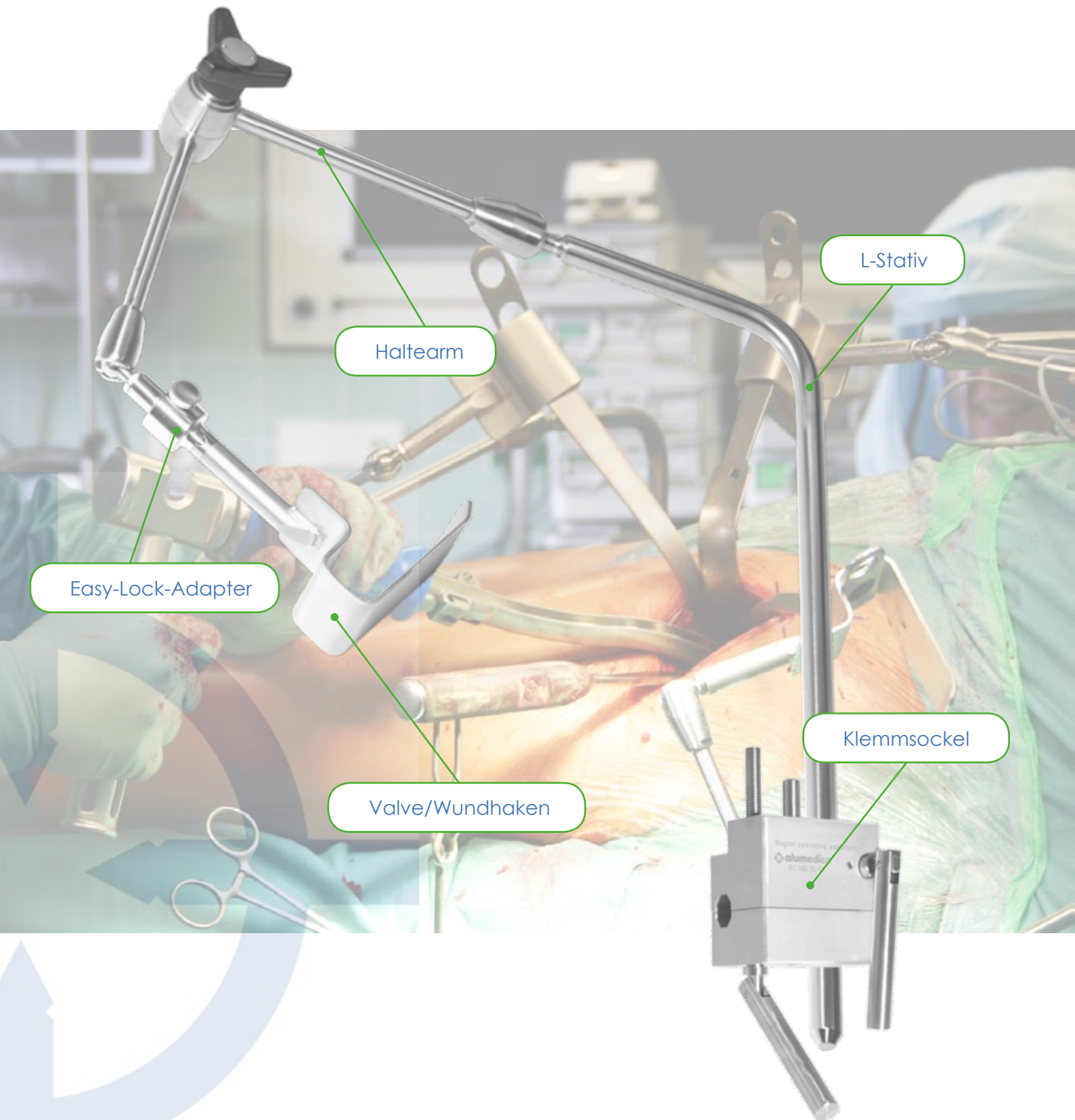


# DAA operative assistant

Armsystem mit 50 und 100 Newton Haltekraft für direkt anteriorer Zugang



Easy-Lock-Adapter

Haltearm

L-Stativ

Valve/Wundhaken

Klemmsockel



## DAA operative assistant

Der **DAA operative assistant** ist ein zuverlässiges, leistungsstarkes und vielseitig einsetzbares Armsystem. Es dient Ihnen als flexible Halterung für Retraktoren oder andere OP-Instrumente.

Erhältlich ist der **DAA operative assistant** in zwei Ausführungen (50 oder 100 Newton Haltekraft), die sich aus folgenden Komponenten und Materialien zusammensetzen:

Komponenten	Materialien
Haltearm mit Sterngriff	rostfreier Edelstahl / Polyamid
L-Stativ	rostfreier Edelstahl
Klemmsockel	Aluminium, Eloxal-beschichtet
Valve/Wundhaken	rostfreier Edelstahl
Easy-Lock-Adapter	rostfreier Edelstahl

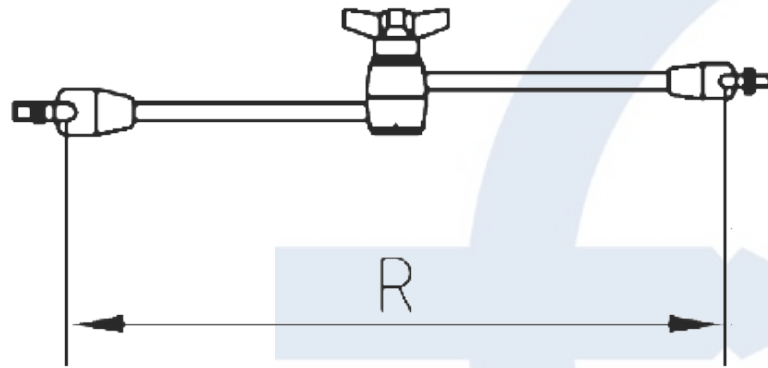
### Vorteile:

- Schnelle, präzise und stabile Fixierung mit nur einem Zentralgelenk.
- Übertreffende Haltekraft und damit sehr sicher für Arzt und Patient.
- Stiller Assistent - zu jeder Zeit verfügbar. Spart OP-Personal ein und macht auch im Notfall einen sicheren Eingriff möglich.
- Die Feststellung des Armsystems ist mechanisch stufenlos einstellbar und erlaubt in jeder Position ein sicheres Fixieren des Systems.
- Armsysteme mit Komponenten sind wartungsfrei, einfach zu reinigen und vollständig bei 134°C autoklavierbar. Armsysteme passen in einen Standard-Sterilisations-Container.
- Armsysteme sind aus rostfreiem Edelstahl.




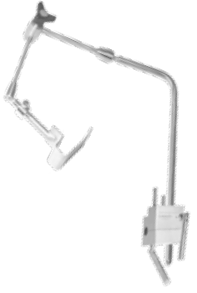
Alle unsere Produkte sind CE beschriftet und entsprechen der 93/42/EEC Richtlinie

## Technische Daten Haltearm



Rohr-Ø	Aktionsradius R	Haltekraft
10 mm	400 mm	50 Newton
12 mm	420 mm	100 Newton

## Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung
87.160-00	 <p>DAA operative assistant 100 N Armsystem</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klemmsockel</li> <li>- L-Stativ (470 x 170 mm)</li> <li>- Haltearm (100 Newton)</li> <li>- Easy-Lock-Adapter</li> <li>- Valve/Wundhacken (90 x 55 mm)</li> </ul>
87.160-10	 <p>DAA operative assistant 50 N Armsystem</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klemmsockel</li> <li>- L-Stativ (470 x 170 mm)</li> <li>- Haltearm (50 Newton)</li> <li>- Easy-Lock-Adapter</li> <li>- Valve/Wundhacken (90 x 55 mm)</li> </ul>

Für detailliertere Auskünfte zu unserem **Nogler operative assistant** stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr  **alumedica** - Team

**Alumedica GmbH**

Hans-Kramer-Str. 8  
78187 Geisingen

Germany

Tel. +49 (0) 7704 60 60  
Fax. +49 (0) 7704 60 61

[www.alumedica.de](http://www.alumedica.de)  
[info@alumedica.de](mailto:info@alumedica.de)

**Distributer:**

